

Conception et fabrication française

Un concentré de technologies - Des résultats prouvés scientifiquement

Cinq années de recherche et développement nous ont permis de concevoir et fabriquer notre propre gamme de cabines de cryothérapie corps entier dont l'efficacité n'est plus à prouver. Notre équipe d'ingénieurs du froid réalise nos technologies en fonction des résultats d'études scientifiques sur la cryothérapie et à l'aide de notre comité scientifique composé notamment d'un masseur kinésithérapeute.


Des résultats incomparables

La peau contient une multitude de récepteurs sensoriels qui permettent au corps d'un individu d'être informé sur l'état de son environnement et de réagir en conséquence. Tout commence pendant une séance de cryothérapie : le froid provoque un choc thermique et une diminution brusque de la température cutanée. Chaque récepteur sensoriel produit alors un influx nerveux qui va être véhiculé jusqu'à l'hypothalamus via les nerfs sensitifs. Une fois l'influx nerveux analysé, l'hypothalamus va activer ses fonctions endocrines, entrainant la régulation de l'hypophyse. Etroitement reliée à l'hypothalamus, cette glande synthétise elle aussi des hormones dont les endorphines, véritables molécules du bien-être.

On peut donc en conclure que plus le corps est exposé au froid, plus les influx nerveux sont nombreux et favorisent la sécrétion hormonale.

Grâce à notre dispositif breveté WholeBody® 95% du corps est exposé au froid, tête et nuque comprises. Un véritable concentré d'efficacité en exclusivité chez Cryo Evolution®.

Technologies brevetées Cryo Evolution permettant la meilleure efficacité de refroidissement cutané en cabine de cryothérapie

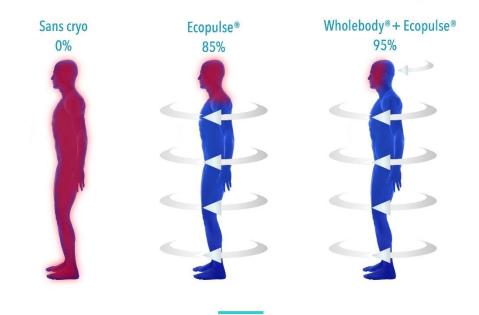

Une expérience unique de cryothérapie

Les études scientifiques réalisées sur la cryothérapie démontrent que l'effet du traitement est le résultat direct de la réduction uniforme de la température de la peau. C'est donc pour optimiser les effets de la cryothérapie que nous avons créé le système brevetée Ecopulse®. Celui-ci a été étudié pour créer un brassage d'air cyclonique afin d'homogénéiser la température dans la cabine et donc de baisser la température de la peau uniformément des pieds jusqu'aux épaules.

Applications de la cryothérapie pour le sport et bien-être

La cryothérapie, c'est l'expérience du froid intense!

Elle consiste à exposer le corps d'une personne à des températures extrêmement froides allant de -110°C à -140°C pendant 3 minutes. Validée par un grand nombre d'études scientifiques, elle est utilisée pour ses nombreux bienfaits dans les domaines de la santé, du sport et du bien-être. Longtemps réservée aux sportifs de haut niveau, elle devient aujourd'hui un acteur incontournable dans le monde entier, séduit de plus en plus d'adeptes et vise un large public.



Préparation physique Récupération musculaire Diminution des courbatures



Meilleure oxygénation des muscles Diminution du temps de récupération Amélioration des performances



Sensation de bien-être Elimination des toxines Pratique 100% naturelle





Remise en forme Réathlétisation Effets anti-inflammatoires



Libération d'endorphines Amélioration du sommeil Lutte contre le stress




Renouvellement cellulaire Raffermissement de la peau Drainage lymphatique

Jouvence, la cabine de cryothérapie nouvelle génération

	Jouvence	Autres cabines dernière génération	Autres cabines ancienne génération
Refroidissement par azote liquide			
Température réglable			
Température réelle du bain	⊘		\otimes
Matières : acier inoxydable et aluminium			\otimes
Système anti-inhalation de vapeurs d'azote			\otimes
Capteurs d'oxygène autonomes	⊘		\otimes
NOUVEAUTE Système breveté WholeBody® Permet de refroidir 95% de la peau	⊘		
Technologie brevetée Ecopulse®	⊘	8	\otimes
Homogénéité de la température	⊘	8	\otimes
Ecran de confort pour l'usager		8	\otimes
Système de levage souple et rapide		8	\otimes
Indicateur du nombre de séances restantes	⊘		

Sécurité Fiabilité Performance

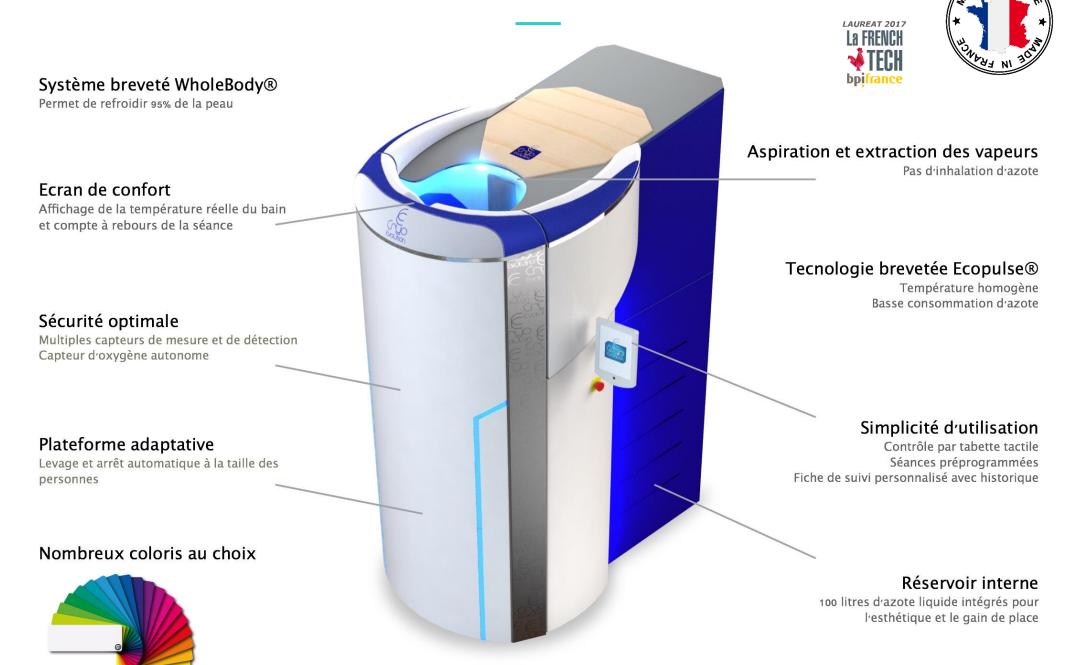

Exemple de rentabilité



Simulation de crédit bail

795 € de loyer Durée : 60 mois

Comprend la cabine et un pack clé en main Azote liquide

Conso / mise à froid : $\approx 4L$ Conso / séance : $\approx 3L$

Coût moyen / litre : 1,08 € TTC

Fréquentation moyenne

10 clients / par jour

Mises à froid : 1 Séances : 10 Recette

Coût moyen d'une séance : 40 € TTC

Revenu par séance : ≈ 35 € Bénéfices

Bénéfice / semaine : 1 393 €

23 jours ouvrés : 6 410 €

Données techniques

Caractéristiques	
Alimentation électrique	220 V ~ 50 Hz - 16A
Consommation électrique	Refroidissement : 0,3KW - Séchage : 1,3 KW - Veille : 0,1 KW
Matières structure et carénages	Inox et aluminium
Isolation	Super Isolant λ = 0,015 W/m.k
Dimensions L x I x H	1564 x 1032 x 2130 mm
Poids maximum supporté	150 kg - test d'usure : 500 heures poids 200kg 4M/seconde RAS
Température dans la cabine	De -120°C à -140°C - sonde de température située dans le bain
Consommation d'azote liquide	Mise à froid : <5 kg – Séance : <3 kg
Temps de séchage	15 minutes

Environnement	
Température ambiante	De 15°C à 30°C
Humidité relative maximum	60 %
Hauteur sous plafond	Pas moins de 2300 mm
Volume de la pièce	Pas moins de 18 m3
Passage de porte	700 mm minimum



Multiples capteurs de mesure et de positionnement pour plus de sérénité

Capteur d'oxygène autonome intégré

Plateforme adaptative : levage et arrêt automatique selon la taille des usagers entre 1,50 m et 2,10 m

Interface de contrôle : Tablette tactile 10" pour une utilisation simple et agréable

Ecran de confort pour l'usager de 4,3" dans son champ de vision

Séances préprogrammées pour plus de simplicité

OPTIONS

NOUVEAUTE Système breveté WholeBody®: Dispositif permettant de refroidir 95% de la peau

Boitier de diagnostic à distance

Indicateur de consommation d'azote liquide :

Permet de connaître le nombre de séances pouvant encore être réalisées avec l'azote liquide restant Réservoir d'azote liquide :

Possibilité de mettre un réservoir interne de 100L ou un réservoir externe pour les plus gros volumes







Qui sommes-nous? Pourquoi nous choisir?



NORTHCRYO x CRYO EVOLUTION:

Nous sommes une entreprise française spécialisée dans la **conception**, la **fabrication** et la **distribution** de cabines de cryothérapie corps entier individuelles.

NOTRE ENGAGEMENT: La satisfaction client!

NOS PRIORITES: Performance, Sécurité et Rentabilité.

NOS VALEURS : Fabrication française, Transparence sur les

données de températures et données de consommation.





UN SERVICE DE QUALITE

Pack clé en main sur mesure Mise aux normes de votre local Assistance téléphonique 7j/7



NOS PARTENAIRES A VOTRE SERVICE

Organismes financiers
Assureurs
Distributeurs d'azote liquide



NOUS SOMMES FABRICANT

Produit garanti Made in France Garantie constructeur 2 ans Equipe sur le terrain

La cryothérapie est notre métier

Notre pack clé en main

Libérez votre esprit des contraintes pour vous occuper pleinement de votre activité. Toute l'équipe Northcryo met son savoir-faire et son expérience à votre service pour vous aider tout au long de votre activité.

NOTRE PACK CLE EN MAIN COMPREND:

- Visite de votre local et agencement de votre espace sur plans numériques.
- Mise en relation avec nos partenaires sérieux et compétents : Organismes financiers, assureurs, distributeurs d'azote liquide
- * Fourniture et installation des équipements nécessaires à la mise aux normes de vos locaux : systèmes de ventilation et d'extraction d'air.
- Livraison, installation, et mise en service de votre cabine de cryothérapie.
- * Formation réalisée dans vos locaux : La cryothérapie ; l'utilisation de votre appareil ; et environnement marketing (communication digitale et print).
- * Fourniture d'outils de communication personnalisés.
- ❖ Assistance téléphonique 7j/7 et entretien périodique.





Un renseignement?

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de devis.

Appelez-nous au +33 (0)7 69 54 22 60

Email sur contact@northcryo.com



